

## Sicherheit in der Endoskopie: Beissschutz mit O<sub>2</sub>- und CO<sub>2</sub>-Nasenkanülen DualGuard

DualGuard setzt Standards in der endoskopischen Praxis. Der Beissschutz kombiniert mit abnehmbarer Doppellumen-Sauerstoffkanüle (mit O<sub>2</sub>-Abgabe und CO<sub>2</sub>-Probenahme) kann bei allen oberen endoskopischen Verfahren und beim Erwachen eingesetzt werden.



Bequem sitzender Beissschutz mit O<sub>2</sub>-Abgabe



Bis zu 20 mm Durchmesser



CO<sub>2</sub>-Probenahmeleitungen für Nase und Mund




LuerSafe selbstschliessender Anschluss




Abnehmbare Doppellumen-Sauerstoffkanüle

## Funktionsweise

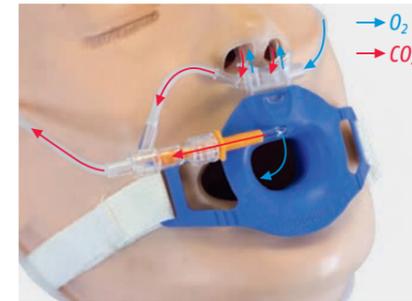

Stadium 1: Während der Endoskopie O<sub>2</sub>-Abgabe und CO<sub>2</sub>-Probenahme über Mund und Nase

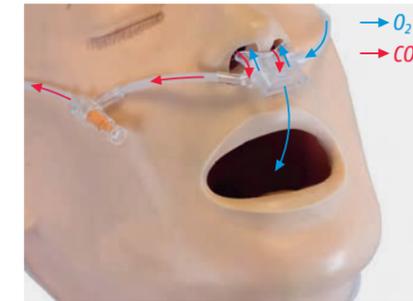

Stadium 2 - Nach dem Eingriff und während des Erwachens Kontinuierliche orale und nasale O<sub>2</sub>-Abgabe und nasale CO<sub>2</sub>-Probenahme

### DualGuard mit Filter

bestehend aus:

- > CO<sub>2</sub>-/O<sub>2</sub>-Nasenkanüle, diskonnektierbar
- > CO<sub>2</sub>-/O<sub>2</sub>-Bypass bei Mundatmung
- > Beiss-Schutz mit einstellbarem Kopfband
- > 3m Schlauch
- > 0.2µ Filter

DualGuard mit Filter (25 Stk.)

032-10-865

### EasyGuard

Mit dem bequem sitzenden Beissschutz (22 mm / 60 Fr) mit anpassbarer Fixierung für höchsten Patientenkomfort bei gleichzeitig guter Zugänglichkeit und Schutz der Zähne des Patienten und der Ausrüstung während endoskopischer Eingriffe.

EasyGuard Beiss-Schutz (25 Stk.)

031-100-80

### Scheibenfilter

Hydrophobe Scheibenfilter schützen den Monitor während der CO<sub>2</sub>-Überwachung vor Feuchtigkeit.

Filter 0.2µ Luer Lock Female / Male (25 Stk.)

010-740

