

Sterile Ultraschall-Bezüge

Linear

REF / Größe

Artikelbeschreibung

31803
18 x 28 cm

FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie
PE-Folie*, Seitennähte, antistatisch
Adaptionsklebefläche – 60 x 120 mm
1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm
VE: 50 Stück

31805
18 x 50 cm

FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie
PE-Folie*, Seitennähte, antistatisch
teleskopgefaltet auf 12 cm
Adaptionsklebefläche – 60 x 120 mm
1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm
VE: 50 Stück

31808
18 x 80 cm

FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie
Adaptionsklebefläche – 60 x 120 mm
1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm
VE: 50 Stück

31812
18 x 120 cm

FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie
PE-Folie*, antistatisch
teleskopgefaltet auf 12 cm
Adaptionsklebefläche – 60 x 120 mm
1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm
VE: 50 Stück

31825
18 x 250 cm

FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie
Adaptionsklebefläche – 60 x 120 mm
1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm
VE: 50 Stück




Haftfolien-Bezug:

Hält den Transducer nach dem Durchziehen faltenfrei an der Folieninnenseite, somit entfallen Übertragungshilfsmittel.

FAZIT:

Unsteriler Kopf befindet sich im Inneren des Schutz-Bezuges, so dass die Untersuchung steril durchgeführt werden kann.

Repositionierung des Ultraschallkopfes möglich.

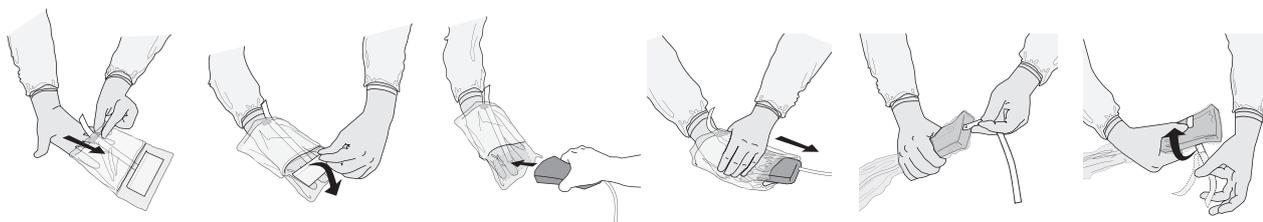

Achtung: Das Silikonpapier am Fingerlift nach vorne langsam abziehen!

Nach der Untersuchung: Die Haftfolie kann **ohne Kleberückstände** vom Transducer entfernt werden, wenn ausschliesslich diese Bezüge eingesetzt werden.

Sterile Ultraschall-Bezüge

Convex

REF / Größe

Artikelbeschreibung

31903
18 x 28 cm

FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie
PE-Folie*, Seitennähte, antistatisch
Adaptionsklebefläche – 60 x 120 mm
1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm
VE: 50 Stück

31905
18 x 50 cm

FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie
PE-Folie*, Seitennähte, antistatisch
teleskopgefaltet auf 12 cm
Adaptionsklebefläche – 60 x 120 mm
1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm
VE: 50 Stück

31908
18 x 80 cm

FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie
Adaptionsklebefläche – 60 x 120 mm
1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm
VE: 50 Stück

31912
18 x 120 cm

FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie
PE-Folie*, antistatisch
teleskopgefaltet auf 12 cm
Adaptionsklebefläche – 60 x 120 mm
1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm
VE: 50 Stück

31925
18 x 250 cm

FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie
Adaptionsklebefläche – 60 x 120 mm
1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm
VE: 50 Stück



Haftfolien-Bezug:

Hält den Transducer nach dem Durchziehen faltenfrei an der Folieninnenseite, somit entfallen Übertragungshilfsmittel.


FAZIT:

Unsteriler Kopf befindet sich im Inneren des Schutz-Bezuges, so dass die Untersuchung steril durchgeführt werden kann.

Haftfolien-Form:

Definierte Faltenbildung am Schallkopf durch Reduzierung der Klebeflächen.

Repositionierung des Ultraschallkopfes möglich.

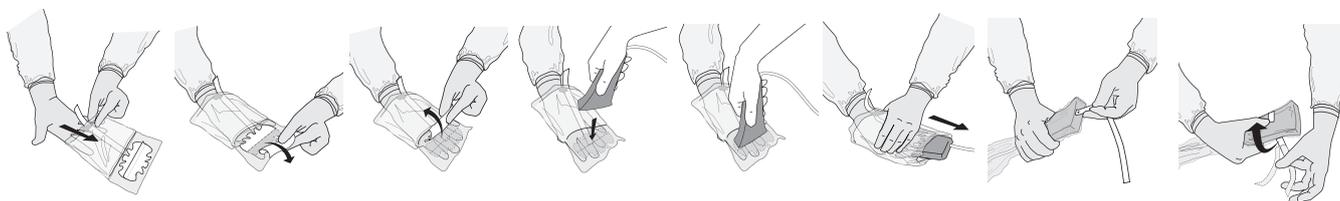

Achtung: Das geschlitzte Silikonpapier langsam von der Mitte in Richtung «Füsschen» abziehen.
Der Abdruck der Trennlinie auf der Klebefolie erleichtert das Aufsetzen der Ultraschall-Sonde.

Nach der Untersuchung: Die Haftfolie kann **ohne Kleberückstände** vom Transducer entfernt werden, wenn ausschliesslich diese Bezüge eingesetzt werden.

Leuag

Leuag AG
Industriestrasse 21
CH-6055 Alpnach Dorf
Tel. +41 (0)41 618 81 00

Leuag SA
Chemin des Condémines 2
CH-1071 Chexbres
Tél. +41 (0)21 946 43 00

info@leuag.ch
www.leuag.ch